SKULL


Lateral view

Position of Patient (擺位/姿勢)

1. 病人採直立或俯臥姿勢。調整病人使頭部的側邊貼近偵測器,而身體微微傾斜使頭部更靠近。 SID / Central Ray (距離/中心射線)

100 cm / 外耳道上 2 吋(5 公分)垂直射入



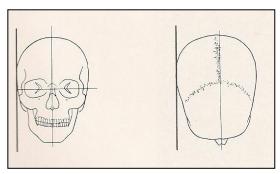



Evaluation Criteria (評片標準)

- 1. 整個頭顱骨必須完整呈現
- 2. 眼眶、外耳道、蝶鞍、乳突憩室及下頷骨各部位都應該重疊

Tips (提示)

若病人無法配合時,也可以這麼做......

- 1. 病人採仰臥的姿勢。
 - 1.1 將病人枕骨墊高,使頭部擺正臉部向上,欲照側貼近 DR 板,射線由太陽穴垂直射入。
 - 1.2 將病人貼片端墊高後,調整病人使臉部朝前,射線由蝶鞍(太陽穴)處垂直射入。

